

¿Estás listo para CEREC?

Dentsply
Sirona

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Redefinida la odontología digital en la consulta.

Para los usuarios de CEREC, es sencillo: CEREC hace mejores hasta a los mejores dentistas.

Los usuarios de CEREC te dirán que la digitalización fue una gran decisión, pero que hasta que la adoptaron, ellos también tuvieron dudas algunas veces. ¿Funcionaría todo sin contratiempos de inmediato? **No.** ¿Podrían aprender a manejar la tecnología? **Por supuesto.** ¿Y la calidad de las restauraciones? **Excelente en todos los sentidos.**

Con una nueva unidad de fresado entre las mejores de su clase y un software intuitivo y altamente automatizado para combinar con CEREC Primescan, nunca ha habido un momento mejor para preparar tu consulta para el futuro con CEREC.

El nuevo sistema CEREC. **Ahora es el momento.**

CEREC

Un flujo de trabajo perfecto con gran flexibilidad para obtener resultados clínicamente fiables.



Ahora es el momento.

El novedoso CEREC te proporciona las herramientas que requiere una odontología digital en consulta superior.

La última generación de nuestro sistema CEREC sube el listón para que puedas ofrecer a tus pacientes una combinación inigualable de odontología en una sola visita con una calidad excelente. Tras 35 años de constantes mejoras, CEREC te ofrece las opciones que necesitas para tratar diferentes indicaciones con la confianza que proporcionan unos resultados excepcionales.


Una solución única diseñada para una odontología digital superior.

El sistema CEREC incluye componentes de la mejor calidad que interactúan a la perfección para asegurar flujos de trabajo perfectos. CEREC Primescan proporciona rápidamente datos de escaneado precisos gracias al nuevo Software CEREC 5, con lo que puedes disponer de propuestas específicas para pacientes basadas en el algoritmo patentado Biojaw. Pero el corazón del sistema es la nueva CEREC Primemill. Con la unidad de fresado de última generación, la odontología digital en consulta es más rápida, fácil y fiable que nunca antes.



Velocidad


Nuestra nueva unidad de fresado, más rápida que nunca, puede procesar una corona de circonio de manera excelente en menos de 5 minutos. También puede tallar cerámica de vidrio mucho más rápido que su predecesora. ¿El resultado? Pacientes satisfechos y una alta productividad.

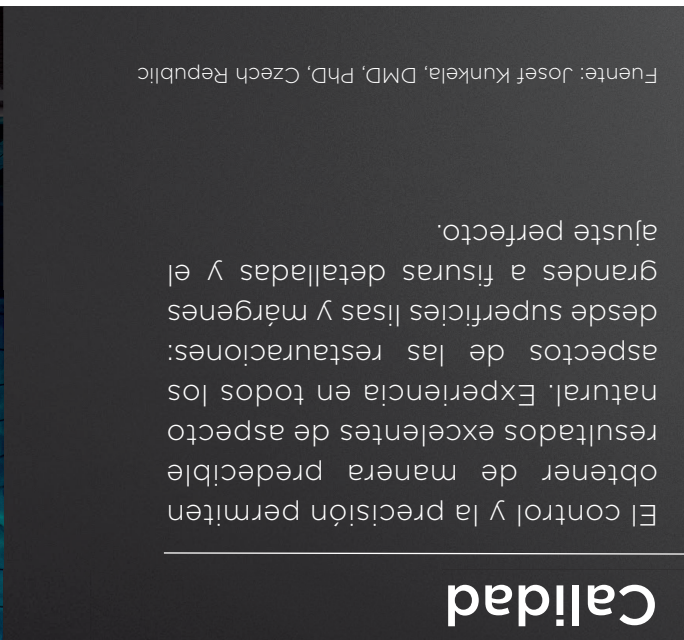

Calidad

El control y la precisión permiten obtener de manera predecible resultados excelentes de aspecto natural. Experiencia en todos los aspectos de las restauraciones: desde superficies lisas y márgenes grandes a fisuras detalladas y el ajuste perfecto.

Fuente: Josef Kunkela, DMD, PhD, Czech Republic

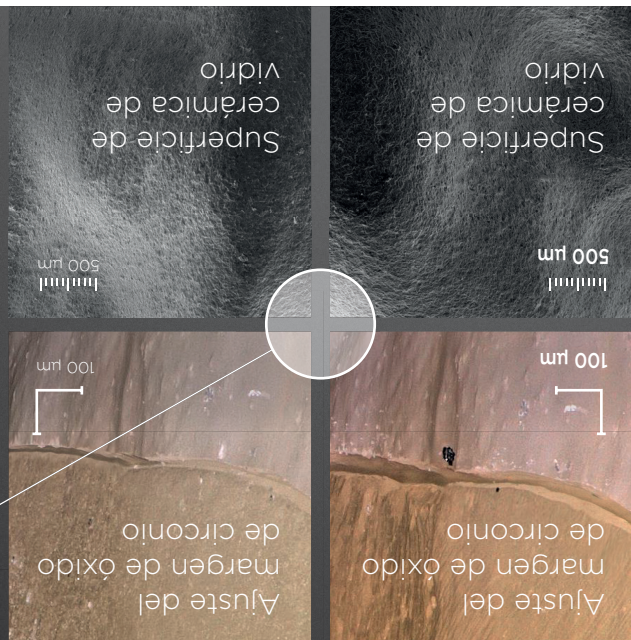

CEREC MC XL CEREC Primemill

CEREC Primemill

La excelencia simplificada.

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Dentsply
Sirona



Comodidad

CEREC Primemill sube el listón de la facilidad de uso, facilitando aún más la integración en las consultas. Una interfaz de usuario interactiva guía a los operadores paso a paso por los flujos de trabajo, de forma que se puede delegar el fresado con toda tranquilidad. La unidad vigila de manera inteligente las funciones y los componentes clave para asegurar una alta productividad.

Bienvenido a un mundo donde no te faltarán opciones! La nueva CEREC Primemill combina fresado en húmedo y en seco y tallado en húmedo con la más amplia selección de materiales validados, lo que le proporciona la flexibilidad y la predictibilidad que necesita para ofrecer a tus pacientes el mejor tratamiento posible.



La excelencia simplificada

CEREC Primemill

Velocidad

Modo de fresado superrápido

Diseñada para ofrecer rapidez y precisión, la nueva CEREC Primemill hereda la potencia probada de su predecesora y aumenta su gran rendimiento a niveles totalmente nuevos. Ahora puedes fresar restauraciones de circonio en modo superrápido en unos 5 minutos, reduciendo los tiempos de procesamiento a menos de la mitad.

Tallado rápido

Modo de tallado rápido mejorado para realizar restauraciones de cerámica de vidrio de alta calidad en menos tiempo.

Calidad

Nuevos componentes que aportan calidad

Una combinación de nuevos componentes electrónicos, de software, de motores y mecánicos permite obtener una resolución más precisa y una dinámica mejorada. Esto ofrece unos detalles de las superficies y unos márgenes de las restauraciones excepcionales, con lo que se logran unos resultados extremadamente precisos.

Nueva herramienta de fresado de 0,5 mm

Esta nueva herramienta superprecisa ofrece resultados clínicos de primera clase y de manera fiable. Cambia a modo de fresado extrafino para obtener un mayor nivel de detalle en las fisuras oclusales y en las áreas interdetales sobre puentes.

Diseñada para destacar, y para ajustarse de forma precisa

CEREC Primemill no solamente se comunica perfectamente con otros dispositivos CEREC. Con su elegante diseño, ofrece la combinación perfecta con el aspecto idóneo para una consulta dental avanzada.

✓ La innovadora banda LED indica el estado de la unidad y el progreso del fresado.

✓ El nuevo diseño del cajón asegura el acceso directo a las herramientas y a los accesorios.

✓ Todas las áreas de la superficie y la cámara son fáciles de limpiar.

Comodidad

Interfaz táctil de 7 pulgadas con guía para el usuario

La nueva interfaz táctil está diseñada específicamente pensando en la delegación y la integración. No solo guía a los usuarios por cada flujo de trabajo, también los lleva paso a paso por los procedimientos de mantenimiento clave y otras tareas habituales.

Escáner de bloques integrado

Esta nueva función que ahorra tiempo, escanea automáticamente los bloques de material con códigos de matriz de datos compatibles y registra la información, incluido el tipo, el tamaño, el color y el factor de dilatación del circonio.

Lector de herramientas RFID

Todas las herramientas de CEREC Primemill incorporan un chip RFID codificado por colores que contiene información que es leída por el escáner RFID y transmitida a la pantalla de estado de la herramienta, alertando al usuario si es necesario cambiarla. Esto asegura que todas las herramientas están funcionando a niveles óptimos, lo que fomenta la productividad.

Versatilidad

Las mejores opciones de fresado y tallado

Elige entre todo el espectro de opciones de mecanizado, que incluye circonio fresado en seco y en húmedo, o tallado en húmedo de cerámica de vidrio e híbrida.

Amplia selección de materiales

Independientemente de la indicación, CEREC Primemill te permite seleccionar entre una amplia gama de opciones de materiales de socios validados.