


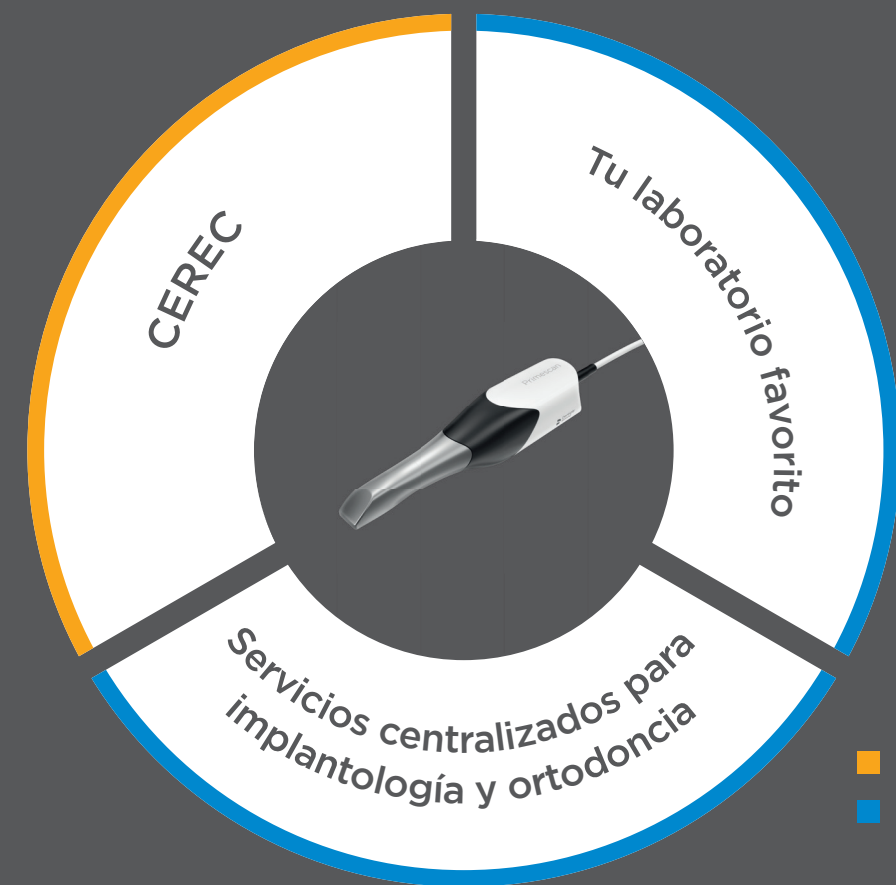

■ Dentro de la consulta
■ Fuera de la consulta

Benefíciate de una satisfacción global

Una opción excelente para conseguir fantásticos resultados: Primescan es el punto de partida perfecto para la odontología digital. Sea cual sea el modo en que deseas diseñar los flujos de trabajo, Primescan permite flujos de trabajo digitales eficientes, tanto en la consulta como con tus socios de preferencia.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y subsanar errores, n.º pedido A91100-M43-C0191-01-7800, impreso en Alemania, n.º dispo04605 WS 0119.V0

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Alemania
dentsplysirona.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments

Dentsply
Sirona

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Dentsply
Sirona

Primescan
Disfruta del
escaneado.




«¿Qué me motiva?
Los mejores resultados.
Y Primescan es
la respuesta».

«Para mí, Primescan establece nuevos estándares en la tecnología de escaneo dental. Tanto para mí como para mi equipo, el escaneo intraoral es ahora más preciso, rápido y sencillo que nunca. Es fácil de manejar, está siempre listo para su uso y se integra perfectamente en nuestro flujo de trabajo. Incluso mis pacientes se benefician de su rendimiento mejorado, puesto que el proceso es mucho más cómodo.

Gracias a la tecnología de última generación, se capturan más datos con mayor resolución y se procesan rápidamente, con total nitidez y una extraordinaria precisión, lo que permite realizar indicaciones para tratamientos desde un solo diente hasta la arcada completa. Además, debido a la conectividad mejorada, mi consulta está conectada con nuestro laboratorio y con otros socios. Así que, todo lo que puedo decir es que lo pruebes y ¡disfruta del escaneo!»

Dra. Verena Freier
Dentista

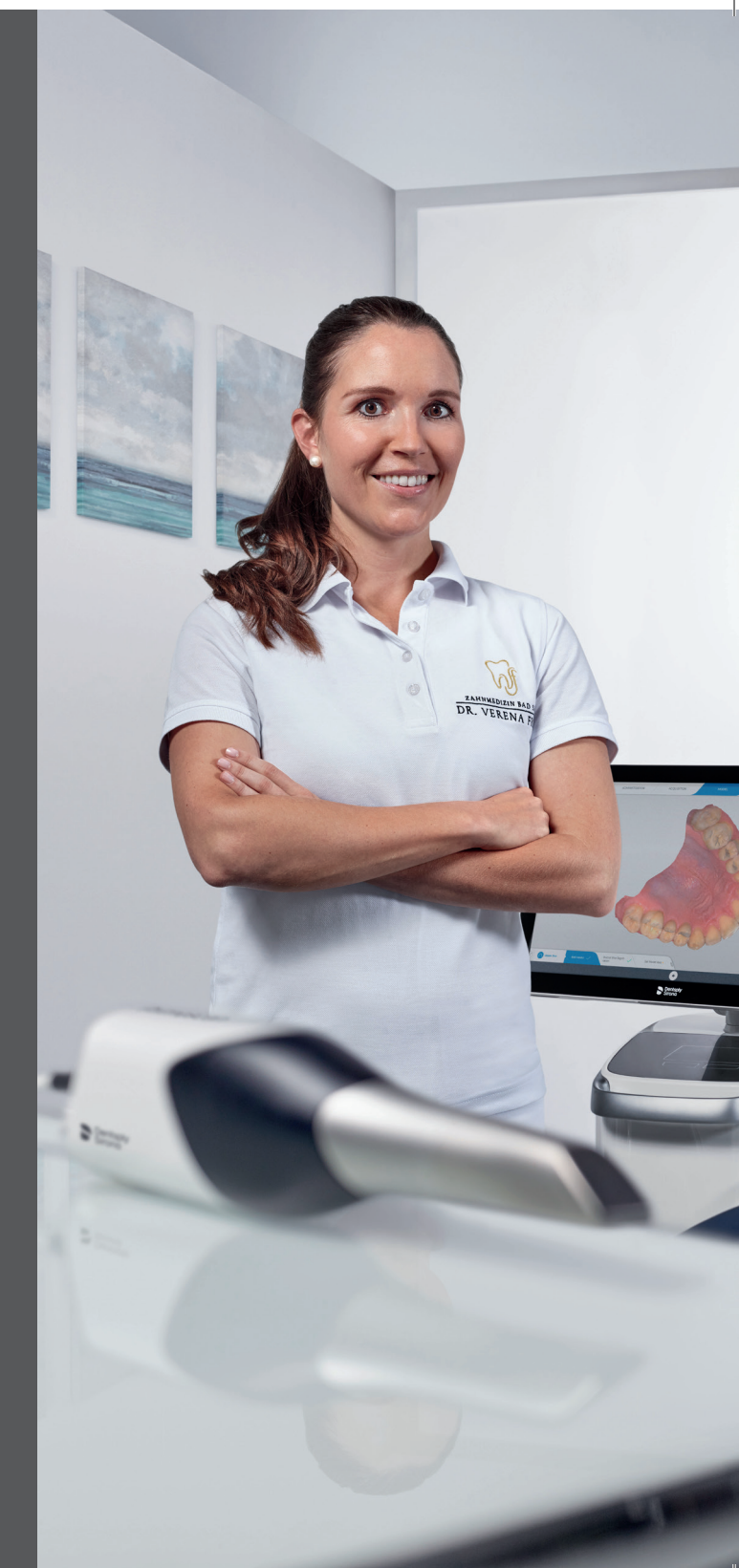

Martin Wohanka
Ingeniero de hardware

Precisión

El nuevo Primescan no solo proporciona un nuevo punto de vista, sino un millón:

El innovador sensor Smart Pixel procesa más de 1 000 000 de puntos 3D por segundo, produciendo datos fotorrealistas y de elevada precisión. De hecho, Primescan es el escáner intraoral más preciso del mercado*. Su tecnología de escaneado de profundidad dinámica permite una precisión y una nitidez excelentes, incluso a una profundidad de hasta 20 mm, lo que supone una ventaja para indicaciones de mayor profundidad.

Lo que se ve es lo que se obtiene: Debido a la capacidad que ofrece Primescan de escanear con una increíble densidad de datos, proporciona estructuras 3D completas de todo lo que esté dentro de su campo de visión, desde el primer escaneado.

Perfecta nitidez hasta
20 mm de profundidad

Procesamiento
de más de
1 millón
de puntos 3D
por segundo

*Fuente: Mehl et al, Accuracy studies at University of Zurich, Int J Comput Dent. (fecha de publicación: marzo de 2019)

Florian Sobirey
Diseñador de la experiencia del usuario

Fácil escaneado
de superficies
difíciles

Para
todos los
procesos
**de desinfección
relevantes**

Facilidad de uso

Disfruta de la libertad de escanear: Primescan te permite comenzar a escanear directamente. Proporciona un autocalentamiento continuo para escanear evitando el empañamiento, por lo que siempre estarás preparado. ¿Ángulos cerrados? ¿Zonas de difícil acceso? ¿Materiales brillantes? Eso no es nada para Primescan. Gracias al mayor campo de visión, podrás visualizar áreas mayores con menos barridos y con una precisión inmediata. Los excelentes resultados del escaneado se muestran instantáneamente en la pantalla táctil del nuevo Acquisition Center.

Controla las infecciones: La capacidad de usar tres vainas diferentes garantiza el cumplimiento tanto de las necesidades de la consulta como de todos los requisitos generales de higiene. Puedes elegir entre vainas de acero inoxidable con cristal de zafiro u otra compatible con el autoclave. También están disponibles vainas desechables de un solo uso.

Velocidad

Acelera el proceso: La exclusiva tecnología de Primescan permite una sencilla captura y un procesamiento más rápido de más datos con mayor resolución. El procesamiento inteligente en Primescan garantiza una perfecta interacción con el software al transmitir exactamente los datos que tiene que procesar. Resultado: Los modelos completos del escaneado 3D se muestran de inmediato, independientemente de lo rápido que se escanee.

Mejora la conectividad: Gracias a las opciones de transferencia de datos abiertas, validadas y optimizadas, los laboratorios y otros socios recibirán al instante los modelos en alta resolución. Con Primescan, te beneficiarás de la libertad de poder elegir las mejores opciones de flujo de trabajo para ti y para tus pacientes.

Integración de más
de **50 000 imágenes**
por segundo

Transferencia instantánea de datos
a socios externos

Dra. Teena Steger
Desarrolladora de software

Llegando a cada detalle: El nuevo Acquisition Center

El nuevo Acquisition Center es una estación de trabajo diseñada para la odontología moderna que tiene en cuenta el trabajo del dentista. Incluye un panel táctil y una pantalla táctil de formato panorámico 16:9 que ofrece una plataforma de trabajo extremadamente intuitiva y ergonómica.

Ventajas a primera vista:

- **Pantalla y panel táctiles** para un uso más cómodo e intuitivo
- **Cinemática** para una colocación ergonómica perfecta
- **Concepto de higiene inteligente** para una desinfección rápida y sencilla
- **Concepto de movilidad** para lograr una flexibilidad completa con una reserva de batería de más de 60 minutos

La mejor elección para tu consulta: Primescan satisface tus necesidades **con dos configuraciones de software individuales:**

Primescan AC con software Connect:

- Admite las opciones de transferencia de datos a tus socios de preferencia
- Transferencia de datos segura y cifrada a través de la bandeja de entrada del Connect Case Center
- Actualización sencilla para un flujo de trabajo completo en la consulta
- Interfaz de usuario táctil e intuitiva

CEREC Primescan AC con software CEREC:

- Admite el flujo de trabajo completo en la consulta para la odontología en una sola visita
- Opciones flexibles para la exportación de datos
- Flujo de trabajo automatizado gracias a la inteligencia artificial
- Interfaz de usuario táctil e intuitiva

