


CLÍNICA DENTAL

Form 3B

Impresión 3D fiable y
asequible en tu consulta

Una solución de impresión 3D completa que ofrece la posibilidad de crear piezas precisas y robustas en tu clínica dental para una gran variedad de aplicaciones.

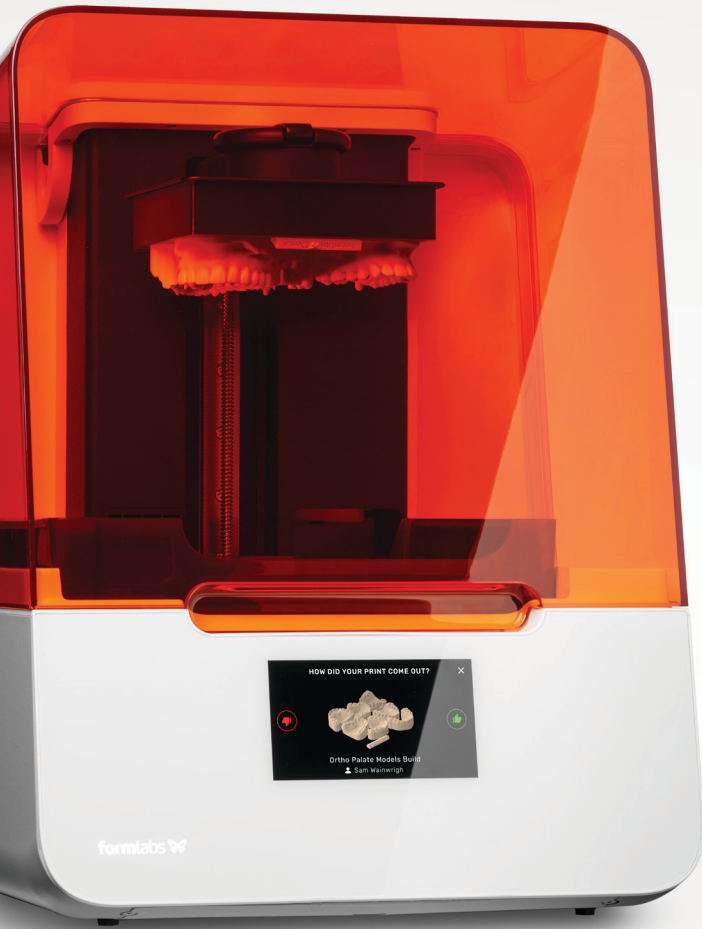


UN PROCESO DE TRABAJO SIMPLE Y FIABLE

Desde software a herramientas de supervisión de impresiones y de posacabado automatizadas, Formlabs ofrece un proceso de trabajo sin complicaciones y limpio que se adapta a cualquier clínica dental.

MAYOR VOLUMEN DE IMPRESIÓN Y MENORES COSTES

Imprime el doble o triple de piezas en una única impresión, en comparación con la menor capacidad de las impresoras DLP en el mercado, y reduce el tiempo que pasas manipulando la impresora para dedicar más tiempo a tareas más importantes.

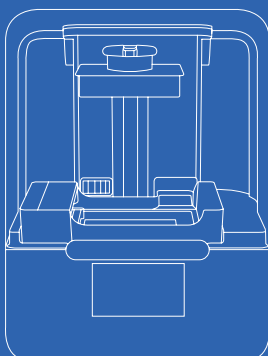

Especificaciones técnicas de la Form 3B

La última generación de la impresión 3D industrial

Tecnología

LFS™ Low Force
Stereolithography

Dimensiones

40,5 × 37,5 × 53 cm
15,9 × 14,8 × 20,9 in

Volumen de impresión

14,5 × 14,5 × 18,5 cm
5,7 × 5,7 × 7,3 in

Grosor de capa

25 - 300 micras
0,001 - 0,012 in

Motor óptico

1 Light Processing Unit
Láser de 250 mW de potencia
25 micras (0,001 in)
Resolución XY

Garantía

Incluye un año de garantía.
Garantía ampliada disponible.

DENTAL SERVICE PLAN

Detrás de Formlabs Dental se encuentra un equipo de especialistas en odontología certificados que saben exactamente cómo ofrecer la asistencia que tu negocio necesita.

Formlabs se compromete a ayudarte a triunfar mediante formaciones personalizadas, verificaciones proactivas de tu impresora y asistencia prioritaria por teléfono y correo electrónico.

formlabs  dental



MODELOS GRANDES PARA DIAGNÓSTICO

White Resin a 100 µm

Hasta 2 conjuntos de modelos (superior e inferior) por impresión en ≈ 5 h por 5–8 € cada conjunto



MODELOS GRANDES PARA DIAGNÓSTICO

Model Resin a 100 µm

Hasta 2 conjuntos de modelos (superior e inferior) por impresión en ≈ 5 h por 5–8 € cada conjunto



GUÍAS QUIRÚRGICAS

Surgical Guide Resin a 100 µm

Hasta 29 guías quirúrgicas por cuadrante por impresión en ≈ 5 h por 0,5–2 € cada pieza

Hasta 8 guías quirúrgicas de arcada completa por impresión en ≈ 4 h por 2–3,5 € cada pieza



FÉRULAS OCLUSALES

Dental LT Clear Resin a 100 µm

Hasta 8 férulas por impresión en ≈ 2,5 h por 3,5–5,5 € cada pieza



MODELOS POR CUADRANTE PARA PRÓTESIS FIJAS

Model Resin a 50 µm

Hasta 8 juegos de modelos por cuadrante (superior, inferior y troquel) por impresión en ≈ 9,5 h por 1,75–3,5 € cada juego



MODELO DE ARCADEA COMPLETA PARA PRÓTESIS FIJAS

Model Resin a 50 µm

Hasta 2 juegos de modelos de arcada completa (superior, inferior y troquel) por impresión en ≈ 9,5 h por 5,5–7 € cada juego

El coste y los tiempos de impresión pueden variar

formlabs  dental

