

# SWISS PRODUCTS

Catálogo  
2020



**EMS**   
MAKE ME SMILE.

# NUESTROS PRODUCTOS SUIZOS



GBT  
página 4



Polvo AIRFLOW®  
página 12



Revelador de Biofilm  
página 18



Instrumentos PIEZON®  
página 26



Tobera PERIOFLOW®  
página 39



PIEZON® Master 700  
página 23



AIRFLOW® Handy 3.0  
página 20



PIEZON® 150  
página 25



PIEZON® 250  
página 24



Accesorios  
página 44



Soluciones de higiene  
página 30



AIRFLOW<sup>®</sup> Prophylaxis Master  
página 6



Mangos AIRFLOW<sup>®</sup>  
página 36



Mangos PERIOFLOW<sup>®</sup>  
página 38



Mangos PIEZON<sup>®</sup>  
página 40

## LEYENDA

FT-XXX XXX€

Número de pedido  
= referencia EMS

Todos los precios de este catálogo son precios recomendados en € sin IVA.  
Precio recomendado de venta al público salvo error tipográfico o de imprenta

# LOS 8 PASOS DEL

## 08 NUEVA CITA

PACIENTE SANO = PACIENTE CONTENTO

- Programe la frecuencia de revisión según su evaluación de los riesgos
- Pregunte a su paciente si le ha gustado el tratamiento

## 07 CONTROLAR

HACER QUE SU PACIENTE SONRÍA

- Compruebe si hay biofilm restante
- Asegúrese que se haya eliminado el cálculo por completo
- Diagnostique las caries con precisión
- Proteja con flúor

## 06 PIEZON®




ELIMINAR EL CÁLCULO RESTANTE

- Utilice el instrumento mínimamente invasivo PS PIEZON® de EMS tanto supra como subgingivalmente hasta 10 mm
- Limpie las bolsas de > 10mm con curetas mini
- Utilice el instrumento PI PIEZON® de EMS en implantes subgingivales de hasta 3 mm y restauraciones

## 05 PERIOFLOW®

ELIMINAR EL BIOFILM EN LAS BOLSAS > 4 A 9 MM

- Utilice el Polvo AIRFLOW® PLUS en dientes naturales, bolsas profundas, furcas e implantes
- Utilice la nueva y más fina Tobera PERIOFLOW®

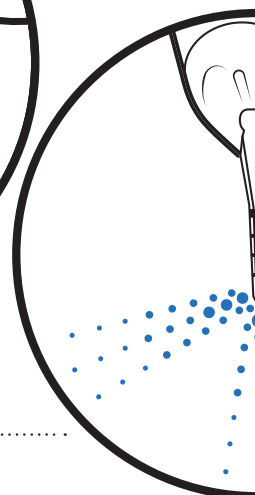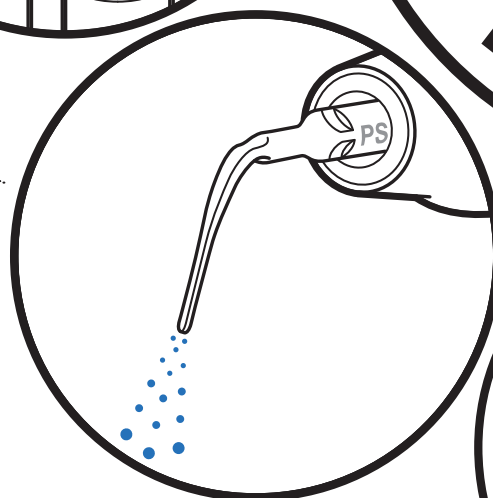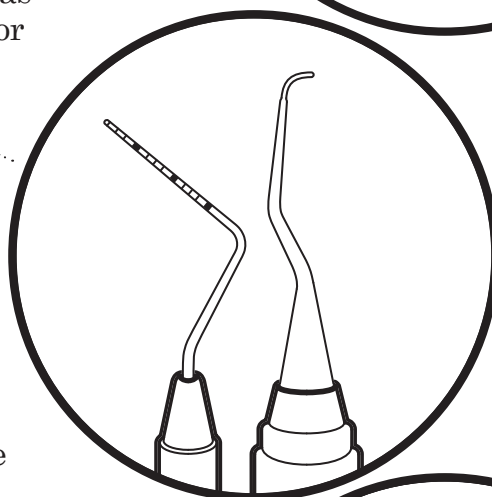

GUIDE  
BIOFILM  
THE

# PROTOCOLO GBT



## 01 VALORAR

SONDEAR Y EXAMINAR CADA CASO CLÍNICO

- Dientes sanos, caries, gingivitis, periodontitis
- Implantes sanos, mucositis, periimplantitis
- Empiece enjuagando con el enjuague bucal BacterX® Pro

## 02 REVELAR

HACER EL BIOFILM VISIBLE

- Muestre a los pacientes el biofilm revelado y sus zonas problemáticas con el Biofilm Discloser de EMS
- El color le guiará en la eliminación del biofilm ► Una vez eliminado el biofilm es más fácil de detectar el cálculo

## 03 MOTIVAR


CONCIENCIAR E INSTRUIR

- Enfatique en la prevención
- Instruya a sus pacientes acerca de la higiene bucal
- EMS recomienda los cepillos dentales Philips Sonicare, cepillos interdentes y Airfloss Ultra

## 04 AIRFLOW®

ELIMINAR EL BIOFILM, LAS MANCHAS Y EL CÁLCULO BLANDO

- Utilice AIRFLOW® en dientes naturales restauraciones e implantes
- Elimine biofilm de manera supra y subgingival hasta 4 mm usando el Polvo AIRFLOW® PLUS 14 µm ► Elimine además el biofilm en las encías, la lengua y el paladar ► Elimine las manchas restantes en el esmalte utilizando el Polvo AIRFLOW® CLASSIC Comfort

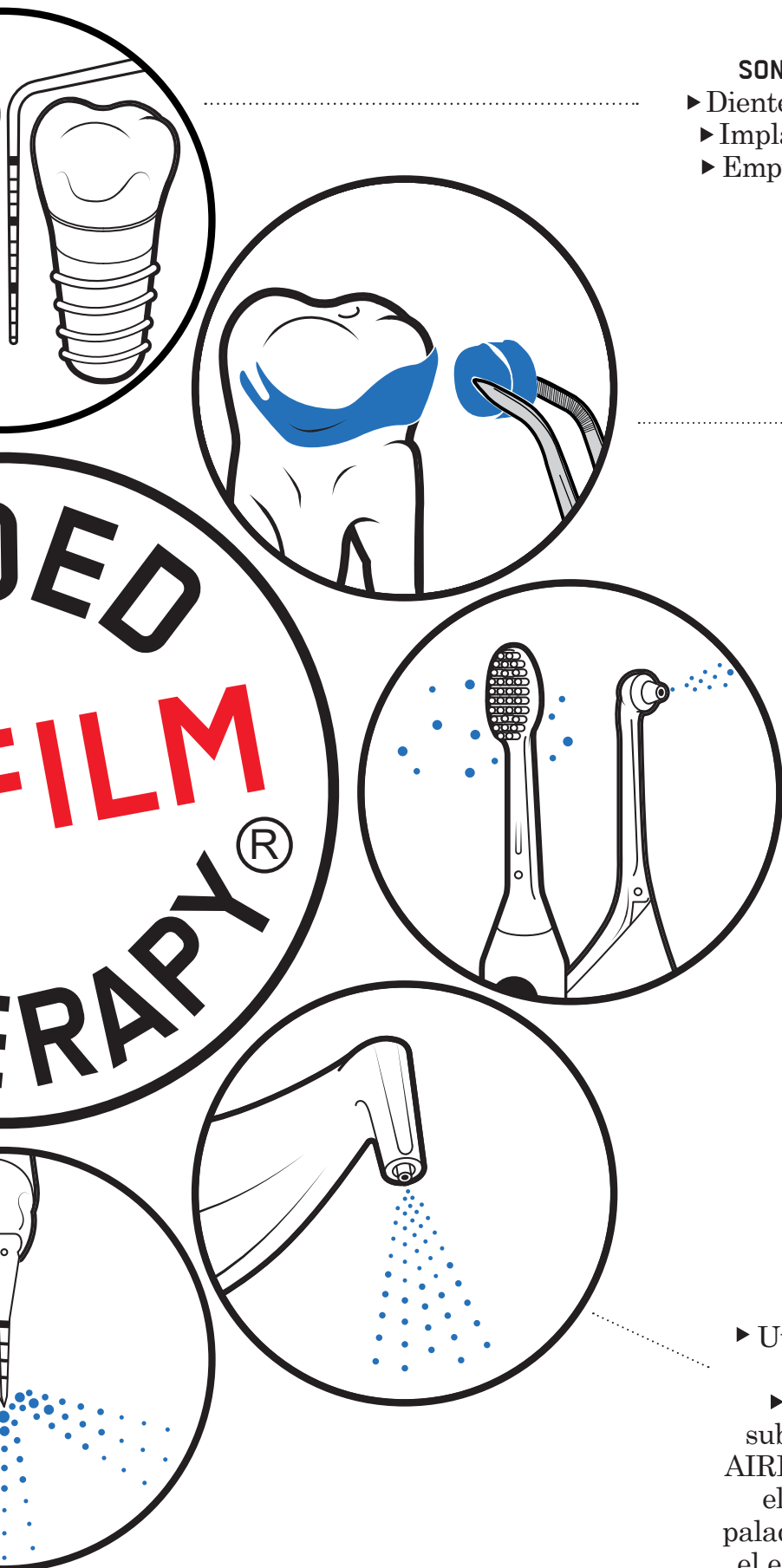

# AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

► La nueva solución de EMS es un cambio de paradigma que permite realizar Guided Biofilm Therapy en condiciones óptimas.



THE CHICAGO  
ATHENAEUM

2018

1



REF FT-229 7.990 €<sup>2</sup>

1 GOOD DESIGN®, uno de los premios de diseño más importantes a nivel mundial del Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design.

2 Vea el precio y las condiciones en la página 3

# INCLUYE:



## APLICACIÓN AIRFLOW®

Mango AIRFLOW®  
Cánula de aspiración con espejo  
Easy Clean  
Filtros de agua y aire  
Set de mantenimiento



## APLICACIÓN PERIOFLOW®

Mango PERIOFLOW®  
10 toberas PERIOFLOW®  
Kit de inicio de instrumento PI



## APLICACIÓN PIEZON®

Mango PIEZON® LED  
3 x instrumentos PIEZON® PS  
4 guías de luz de repuesto



Cámaras de polvo  
PLUS y CLASSIC



Pedal inalámbrico con boost



Botella PIEZON®



Botella NIGHT CLEANER  
+ 800 ml  
Accesorio Clip+Clean



Revelador de  
Biofilm



12 botellas polvo AIRFLOW® PLUS subgingival y  
supragingival  
2 botellas polvo AIRFLOW® CLASSIC Comfort para  
manchas  
Suficiente polvo para tratar 175 pacientes  
aproximadamente.

Vea los accesorios en la página 42

# AIRFLOW® PROPHYLAXIS

► La estación de profilaxis ultracompacta todo en uno con un diseño futurista.

**Incluye:**

- Carrito
- Cable de red
- Kit de instalación

Recomendado para  
AIRFLOW® One:



y para AIRFLOW® Prophylaxis Master cuando el equipo está conectado a la red de agua de la clínica.



REF DW-048B 960 €

# STATION



► La estación de profilaxis ultracompacta todo en uno con un diseño futurista. Integra un sistema de suministro de agua independiente para una mayor ergonomía sin necesidad de conexión de suministro de agua externo.

## Incluye:

- Carrito
- Botella de agua de 800 ml
- Filtro de aire
- Cable de red
- Kit de instalación

Recomendado para:



AIRFLOW®  
Prophylaxis Master



REF DW-048A 1.165 €

# AIRFLOW® ONE



► Para los clínicos que ya cuentan con unidades PIEZON® NO PAIN en su sillón dental o en un equipo de sobremesa.



REF FT-230 6.290 €

# INCLUYE:



## APLICACIÓN AIRFLOW®

Mango AIRFLOW®  
Cánula de aspiración con espejo  
Easy Clean  
Filtros de agua y aire  
Set de mantenimiento



## APLICACIÓN PERIOFLOW®

Mango PERIOFLOW®  
20 toberas PERIOFLOW®



Cámaras de polvo  
PLUS y CLASSIC



Pedal inalámbrico con boost



Botella de agua



Botella NIGHT CLEANER  
+ 800 ml  
Accesorio Clip+Clean



Revelador de  
Biofilm



12 botellas polvo AIRFLOW® PLUS subgingival y  
supragingival  
2 botellas polvo AIRFLOW® CLASSIC Comfort para  
manchas  
Suficiente polvo para tratar 175 pacientes  
aproximadamente

Vea los accesorios en la página 42

# POLVO AIRFLOW<sup>®</sup> PLUS

► Polvo AIRFLOW<sup>®</sup> PLUS es la tecnología que elimina el biofilm y el cálculo blando de forma mínimamente invasiva en todo tipo de superficies:

- Esmalte
- Dentina
- Tejido blando
- Lengua y paladar
- Dientes de leche
- Aparatos de ortodoncia
- Superficies de implante
- Restauraciones

Sin dolor ni sabor salado.  
Sus pacientes lo amarán.



Primer  
premio a la  
innovación

► La partícula de eritritol proporciona una aplicación única para uso supragingival y subgingival. El tamaño de la partícula del polvo PLUS es de solo 14 µm.



4 x 120 g = 480 g

REF DV-082/A 99,00 €

# UN SOLO POLVO

## PARA EL 90% DE LOS CASOS



**COMODIDAD ÓPTIMA**  
**MÍNIMAMENTE INVASIVO**  
**MÁXIMAMENTE PREVENTIVO**

### DIENTES

- ▶ Dientes de leche y definitivos
- ▶ Espacios interdientales
- ▶ Dientes apiñados
- ▶ Dentina expuesta
- ▶ Fosas y fisuras
- ▶ Esmalte desmineralizado

### TRATAMIENTO DE CARIES

- ▶ Antes de la detección de la caries
- ▶ Antes del sellado
- ▶ Antes de la fluoración

### TEJIDOS BLANDOS

- ▶ Surcos
- ▶ Bolsas poco profundas de hasta 4 mm
- ▶ Bolsas profundas > 4 a 9 mm
- ▶ Lengua y paladar

### ORTODONCIA

- ▶ Brackets de ortodoncia
- ▶ Pacientes con Invisalign

### ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

- ▶ Coronas y carillas
- ▶ Antes de la colocación de restauraciones
- ▶ Antes del blanqueamiento

### IMPLANTES

- ▶ Surco de periimplante
- ▶ Bolsas profundas de periimplante



# POLVO AIRFLOW® CLASSIC ► COMFORT

## En esmalte SOLAMENTE

► Nuestro polvo de bicarbonato de sodio presenta ahora una nueva fórmula: AIRFLOW® CLASSIC Comfort con un tamaño medio de partícula de 40 µm para mayor comodidad. Sin sabor salado.



- 40µm
- Bicarbonato de sodio



Sabor a limón

4 x 300g = 1.200g

REF DV-048/A/LEM

96,00 €



Sabor a cereza

4 x 300g = 1.200g

REF DV-048/A/CHE

96,00 €



Sabor a menta

4 x 300g = 1.200g

REF DV-048/A/MIN

96,00 €



Tutifruti

4 x 300g = 1.200g

REF DV-048/A/TUT

96,00 €


# POLVO AIRFLOW® GLICINA



Sub y supragingival para eliminar el biofilm solamente.

- 25 µm
- Glicina

► Históricamente el primer polvo subgingival AIRFLOW®.  
Sin sabor salado.

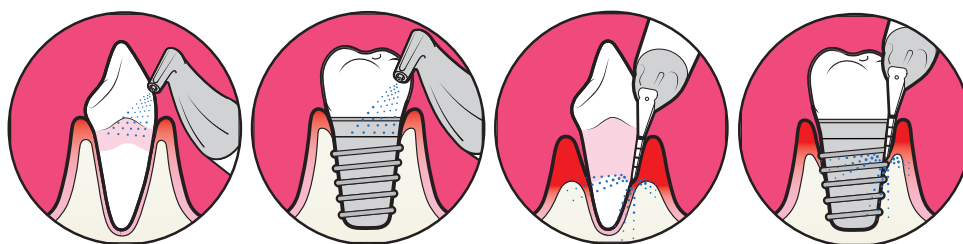

4 x 120 g = 480 g

DV-070/A

90,00 €



# UTILICE SOLO POLVOS EMS!

► Los polvos EMS son mucho menos abrasivos que las técnicas de desbridamiento mecánico tradicionales como las gomas de pulir y el raspado manual. Por este motivo, recomendamos primero AIRFLOW® y PERIOFLOW® y después PIEZON®. GBT: la forma mínimamente invasiva para la Eliminación Mecánica Profesional de la Placa (Professional Mechanical Plaque Removal, PMPR).

► Gracias al revelado en el tratamiento GBT, la coloración también minimiza la abrasión de AIRFLOW®: si no hay más color, no hay más biofilm, la misión de AIRFLOW® se cumple respetando al máximo los tejidos dentales.

⚠ Los equipos de EMS se han diseñado y probado para uso exclusivo de los polvos de profilaxis de EMS.

## ! UTILICE SÓLO POLVOS EMS





Estudio de Barnes'






**OSSPRAY**  
**SODIO DE CALCIO**  
**FOSFOSILICADO<sup>1</sup>**

**POLVO AIRFLOW® PLUS**  
**DE ERITRITOL DE EMS<sup>2</sup>**

**BICARBONATO**  
**DE SODIO DE EMS<sup>3</sup>**

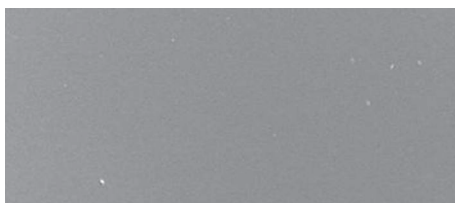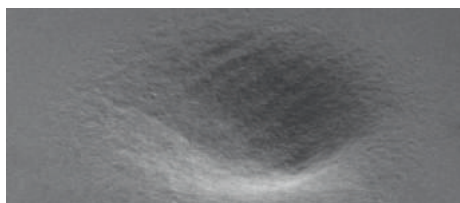

**EFFECTO DE 5 SEG DE PULIDO DE AIRE EN UN ESMALTE HUMANO**

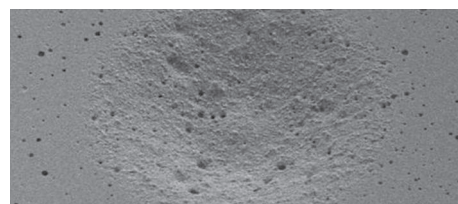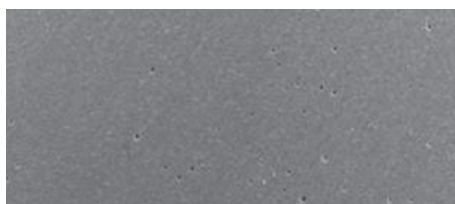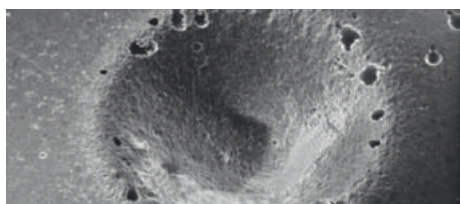

**EFFECTO DE 5 SEG DE PULIDO POR AIRE EN UN IONÓMERO DE VIDRIO**

1. Barnes CM, et al. J Clin Dent 2014;25:76-87. | 2. Para pruebas complementarias, el polvo AIRFLOW® PLUS se ha presentado a J Clin Dent (Barnes CM, et al.). | 3. Barnes CM, et al. J Clin Dent 2014;25:76-87. En el estudio de Barnes, J Clin Dent 2014, el bicarbonato de sodio de EMS tenía un tamaño de partícula de 65 µm. El nuevo polvo AIRFLOW® CLASSIC Comfort tiene un tamaño de partícula de 40 µm, para una mayor suavidad y comodidad del paciente.

# GUÍA DE POLVOS EMS

## RECOMENDADOS



## OTRO POLVO DE EMS

| Nombre              |                             | PLUS      | CLASSIC<br>COMFORT       | PERIO   |
|---------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| Ref                 |                             | DV-082    | DV-048                   | DV-070  |
| Sabor               |                             | NEUTRO    | LIMÓN<br>MENTA<br>CEREZA | NEUTRO  |
| Composición         |                             | ERITRITOL | BICARBONATO<br>DE SODIO  | GLICINA |
| Tamaño de partícula |                             | ~14µm     | ~40µm                    | ~25µm   |
| pH                  |                             | ~7        | ~8.1                     | ~6      |
| Diente              | Manchas y cálculo blando    | ✓         | ✓                        | ✗       |
|                     | Esmalte                     | ✓         | ✓                        | ✓       |
|                     | Manchas blancas del esmalte | ✓         | ✗                        | ✓       |
|                     | Fosas y fisuras             | ✓         | ✗                        | ✗       |
|                     | Dentina                     | ✓         | ✗                        | ✓       |
| Tejidos blandos     | Encía                       | ✓         | ✗                        | ✓       |
|                     | Lengua y paladar            | ✓         | ✗                        | ✓       |
| Restauraciones      | Composite híbrido           | ✓         | ✗                        | ✓       |
|                     | Ionómero de vidrio          | ✓         | ✗                        | ✓       |
| Implantes           | y tejidos periimplantarios  | ✓         | ✗                        | ✓       |
| Ortodoncia          | Brackets y aparatos         | ✓         | ✗                        | ✓       |



Tenga cuidado con los polvos que se venden como «compatibles» con EMS, ya que pueden dañar los tejidos bucales y el equipo. Aquí se ve una tobera completamente dañada por estos agresivos polvos.

- Utilice solo polvos EMS con sus equipos EMS.
- El uso de polvos no autorizados por EMS dará lugar a la pérdida de la garantía.



# ¿POR QUÉ HACER EL BIOFILM VISIBLE?

► Con GBT, buscamos eliminar todo el biofilm, incluidas las zonas difícilmente accesibles.

► Si el biofilm se hace visible, se elimina mucho más rápido con GBT.

► Lo que ve es lo que elimina.

Eliminación del color = Eliminación del biofilm. También en tejidos blandos.

► A los usuarios de instrumentación manual, gomas de pulir y pasta «de pulir» no les gusta revelar el biofilm, porque necesitarían mucho más tiempo para terminar el tratamiento.

► El German Stiftung Warentest reportó que la profilaxis convencional solo elimina el 50 % del biofilm en las zonas difíciles.

► La coloración de los dientes y encías ayudará además a motivar al paciente para que mejore el cuidado en casa – OHI.



Este paciente de 14 años tiene una carencia significativa de higiene bucal.  
El agente revelador muestra un biofilm masivo acidogénico.



Cortesía del Dr. Gleb Aseev

# REVELADOR DE **BIOFILM**



- Nuevo revelador de biofilm desarrollado por EMS.
- El revelador de biofilm de EMS visibiliza la presencia de biofilm duro y blando.

## ► 250 **PELLETS REVELADORES**

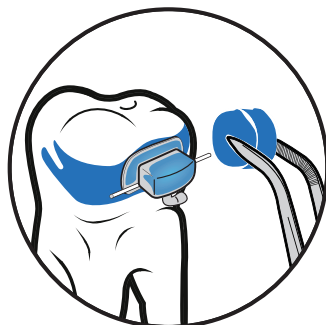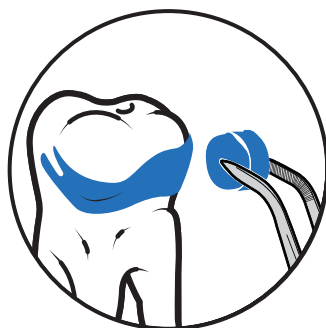

- Pellets prehumedecidos para revelar el biofilm en 2 tonos. Rojizo para el biofilm blando y azul para el duro.

### **HAGA EL BIOFILM VISIBLE:**

Destaque en los pacientes el biofilm revelado y sus áreas problemáticas. El color guiará la eliminación del biofilm con el polvo AIRFLOW® PLUS. Una vez se retira el biofilm, el cálculo es más fácil de detectar.

1 caja con 250 pellets

REF DV-158 **44,00 €**

# AIRFLOW® HANDY 3.0

► AIRFLOW® Handy 3.0 único diseñado para Polvo AIRFLOW® PLUS.



PERIOFLOW®  
Tobera con marcas  
de profundidad.



Easy Clean  
Vea página 36



Easy Fill

Vea los accesorios en la página 47

# 4 CONFIGURACIONES

## PREMIUM



### Incluye:

- Mango AIRFLOW®
- Mango PERIOFLOW®
- 40 toberas PERIOFLOW®
- Easy Clean
- Easy Fill
- Set de mantenimiento
- 1 botella + 4 botellas al registrar el producto en MY EMS\*

**REF FT-225#CONEXIÓN 1.690 €**

Vea página 22

## PLUS



### Incluye:

- Mango PLUS
- Easy Clean
- Easy Fill
- Set de mantenimiento
- 1 botella + 4 botellas al registrar el producto en MY EMS\*

**REF FT-221PLUS#CONEXIÓN 1.390 €**

Vea página 22

## PERIO



### Incluye:

- Mango PERIOFLOW®
- 40 toberas PERIOFLOW®
- Easy Clean
- Easy Fill
- Set de mantenimiento
- 1 botella + 4 botellas al registrar el producto en MY EMS\*

**REF FT-221PERIO#CONEXIÓN 1.390 €**

Vea página 22

## SUPRA



### Incluye:

- Mango AIRFLOW®
- Easy Clean
- Easy Fill
- Set de mantenimiento
- 1 botella

**REF FT-220#CONEXIÓN 1.190 €**

Vea página 22

\*Para la UE solamente

# SU UNIDAD AIRFLOW®

► Basta con conectar su Handy 2+ a la turbina del sillón dental PARA TODAS las aplicaciones AIRFLOW®. Conexiones disponibles para la mayoría de sillones dentales:

Escriba esta referencia de conexión en su número de pedido:



# Midwest  
Conector universal



# Kavo



# Sirona



# W&H



# NSK



# Castellini



# Bienair



# Borden



# PIEZON® MASTER 700



## STANDARD

## PREMIUM



### Incluye:

- 1 mango PIEZON® LED
- Instrumentos PIEZON® A, P, PS
- 2 botellas de irrigación PIEZON® 350 ml
- Steribox
- Set de mantenimiento
- Pedal multifunción
- 1 soporte magnético para mango

### Incluye:

- 2 mango PIEZON® LED
- Instrumentos PIEZON® A, P, PS
- 2 botellas de irrigación PIEZON® 350 ml
- Steribox
- Set de mantenimiento
- Pedal multifunción
- 2 soportes magnéticos para mango

REF FT-194#STD 3.290 €

REF FT-194#PREM 3.990 €

Vea los accesorios en la página 45

# PIEZON® 250



reddot design award

► Solución compacta con botella de irrigación independiente.

## Incluye:

- 1 mango PIEZON®
- Instrumentos PIEZON® A, P, PS
- 1 botella de irrigación PIEZON® 350 ml
- Set de mantenimiento
- Pedal 2 funciones



Cómodo control  
con el dedo, diseñado para un  
uso intuitivo



Vea los accesorios en la página 46

LED REF FT-224 **1.990 €**

Sin LED REF FT-216 **1.690 €**

# PIEZON® 150

► Filtro de agua externo para mejor control de infecciones.

**Incluye:**

- 1 mango PIEZON®
- Instrumentos PIEZON® A, P, PS
- Set de mantenimiento
- Pedal 2 funciones



Zona de potencia  
Perio para  
máxima comodidad



Vea los accesorios en la página 46

LED **REF FT-223 1.450 €**  
Sin LED **REF FT-215 1.150 €**

# SWISS INSTRUMENTOS

► El eslogan "I feel good" se lanzó cuando EMS inventó el instrumento PS PIEZON® NO PAIN.

► El *Original Swiss* Instrumento PIEZON® PS hace el 95% de los tratamientos. No se necesitan diferentes instrumentos, lo que facilita el trabajo.

Para el 5% restante, EMS tiene una nueva solución: Los instrumentos PIEZON® PSR y PSL.




Instrumento PIEZON® PS

► La tecnología piezocerámica PIEZON® fue inventada por Pierre Mabilie, cofundador de EMS.

## ¿SABÍA QUE...?

El prestigioso fabricante de relojes suizo Jaeger Lecoultre fue el primer colaborador de EMS Swiss Instruments cuando EMS aún era una startup, mucho antes de que se construyera el Centro de Producción y Centro de Investigación de la empresa en Nyon (Suiza).

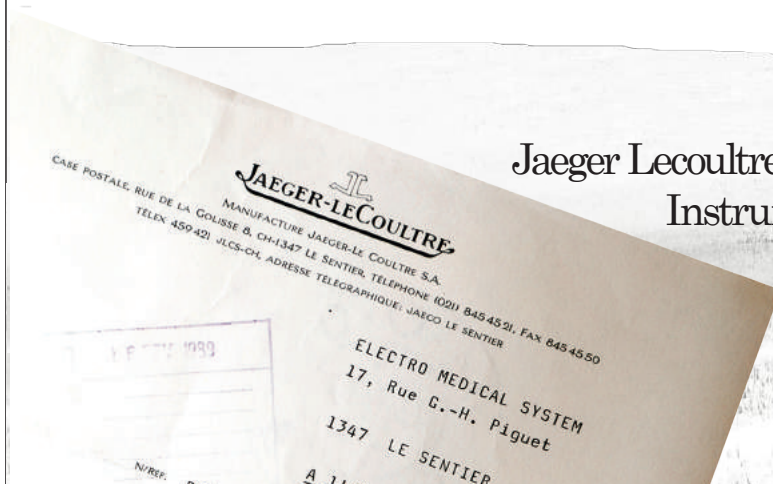



# USE SOLO SWISS INSTRUMENTS ORIGINALES DE EMS!



Política de FDI - *World Dental Federation*:

"El objetivo de la política es ayudar a garantizar que los productos dentales sean seguros para el cuidado del paciente y que cumplan con las especificaciones de los fabricantes, las normas internacionales y las regulaciones gubernamentales".

Siguiendo la declaración de la FDI sobre "Productos dentales no compatibles", tenga en cuenta que los equipos EMS se han diseñado y probado para uso exclusivo con los instrumentos EMS PIEZON®.

Los instrumentos EMS, la pieza de mano y el módulo electrónico NO PAIN tienen que vibrar en armonía como en una trilogía. El uso de los llamados "compatibles" y las sugerencias de copia de terceros puede dañar los dientes de sus pacientes y las piezas de mano de EMS. Fueron desarrollados y hechos por EMS el uno para el otro. Un instrumento PS está diseñado para hasta 2.000 tratamientos. El coste por uso de un instrumento PS es de solo 5 céntimos. No hay absolutamente ninguna razón para "ahorrar" dinero aquí y usar instrumentos "compatibles". Si la pieza de mano PIEZON® se daña (la rosca) perderá su garantía. Al final del día, las puntas "compatibles" siempre le costarán más.



# INSTRUMENTOS PIEZON®

## INSTRUMENTO PS

Instrumento universal para PIEZON® subgingival y supragingival.

Mejor acceso interproximal adecuado para el 95% de los casos.



FRONT SIDE

REF DS-016A 99,90 €

REF DS-016A/T (X3) 269,70 €

## INSTRUMENTO PI

Limpieza de implantes. PEEK de polímero de alta tecnología. Recomendado para implantes y restauraciones. Coloque el instrumento PI en el endochuck de 120°



REF DT-065A (X4) 109,90 €

## ENDOCHUCK 120°

Para instrumentos PI y mucho más.



REF DS-010A 99,90 €

## INSTRUMENTO PSL

Acceso proximal, mesial y distal, supragingival y subgingival.



REF DS-083A 129,90 €

## INSTRUMENTO PSR

Acceso proximal, mesial y distal, supragingival y subgingival.




REF DS-084A 129,90 €

# SOLO NECESITAS 4



## INSTRUMENTOS PSR Y PSL

Acceso proximal, mesial y distal,  
supragingival y subgingival.

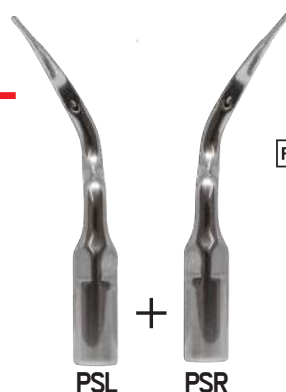

REF FS-461

259,80 €

Compatible con:



# SOLUCIONES DE HIGIENE

## NIGHT CLEANER



► NIGHT CLEANER ofrece limpieza y desinfección a largo plazo y fácil de usar. Mantenga la línea de agua de su equipo "libre de biofilm".

**EL PROCEDIMIENTO ES 100% AUTOMÁTICO.  
MENOS DE 10 SEGUNDOS POR LA NOCHE.  
MENOS DE 50 CÉNTIMOS DE LIMPIEZA AL DÍA.  
PARA LA LIMPIEZA DE LOS CONDUCTOS  
AIRFLOW® Y PIEZON®**

Compatible con:



**6 X 800 ML NIGHT CLEANER**  
6 meses de uso.

REF DV-154-A **76,70 €**

# HIGIENE EN LOS CONDUCTOS DE LÍQUIDOS



## EMS - ULTRA CLEAN



► Con un 6% de peróxido de hidrógeno, EMS Ultra Clean permite la desinfección diaria de equipos de sobremesa PIEZON®.

Compatible con:



Consultar disponibilidad

**EMS - ULTRA CLEAN**  
6 x 1000 ml

REF MUC-006

**126,50 €**

# BACTERX<sup>®</sup> PRO



Contiene un 0,1% de gluconato de clorhexidina, con o sin alcohol.

## PARA EL PACIENTE

### Profilaxis de cuidado en casa

Se debe utilizar durante un breve periodo de tiempo y solamente por recomendación de su odontólogo.



**50X SIN ALCOHOL**  
50 botellas x 100 ml

REF DV-115/A **129,90 €**



**50X CON ALCOHOL**  
50 botellas x 100 ml

REF DV-116/A **129,90 €**

## EN LA CLÍNICA

### Limpieza bucal del paciente.

Uso profesional en clínicas dentales previo al tratamiento dental profesional.  
Ofrezca un vaso de BacterX® Pro a su paciente para que se enjuague (20-30 s).

Consultar disponibilidad



**SIN ALCOHOL**  
4 botellas x 1 l

REF DV-114/A

**59,90 €**



**CON ALCOHOL**  
4 botellas x 1 l

REF DV-113/A

**59,90 €**

## PARA TRATAMIENTOS PIEZON®

### Líquido de irrigación antimicrobial

Uso profesional en clínicas dentales como líquido de irrigación de ultrasonidos.

Compatible con:



# ACCESORIOS DE HIGIENE

## CLIP + CLEAN



REF EL-655

19,90 €

Compatible con:



- CLIP+CLEAN sujeta las mangueras de AIRFLOW® y PIEZON® a la cubeta mientras que se realiza el procedimiento diario NIGHT CLEANER.
- CLIP+CLEAN es la protección de grifo de su equipo cuando no hay ninguna botella conectada.

## EASY CLEAN



REF FV-083

29,90 €



Utilice Easy Clean después de cada tratamiento AIRFLOW® y PERIOFLOW® antes de esterilizar los mangos. Impide y, en algunos casos, soluciona el taponamiento del mango. Easy Clean se utiliza fácilmente con una jeringuilla de agua. Ya no se necesitan agujas.

Compatible con todos los mangos AIRFLOW® y PERIOFLOW®:



## ÚTIL PARA RETIRAR TOBERAS



REF DT-095

19,90 €




- Instale y retire las toberas PERIOFLOW® del mango.

Compatible con todos los mangos PERIOFLOW®:



## ADAPTADOR DE TERMDESINFECCIÓN

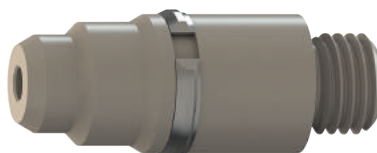

REF FV-088

49,90 €

- Conecte los mangos del Handy 3.0 a la unidad de termodesinfección.

Compatible con:



# MANGOS AIRFLOW®

## APLICACIÓN AIRFLOW®

REF FS-457 359,90 €

- ▶ Mango AIRFLOW®
- ▶ Easy Clean
- ▶ Set de mantenimiento

135°C  
SSS > 1000 ciclos

DAC



## ¡ASÍ DE SENCILLO!

Utilice Easy Clean después de cada tratamiento AIRFLOW® y PERIOFLOW®, antes de esterilizar los mangos. Impide y, en algunos casos, soluciona el taponamiento del mango. Easy Clean se utiliza fácilmente con una jeringuilla de agua. Ya no se necesitan agujas.

135°C  
SSS

EASY CLEAN



REF FV-083 29,90 €



► Mangos específicos para ergonomía óptima.



REF EL-545# 359,90 €



> 1000 ciclos



Adaptador, vea página 22

Compatible con:



REF EL-540# 249,90 €



> 1000 ciclos



Adaptador, vea página 22

Compatible con:



REF EL-185#A 249,90 €



> 1000 ciclos



Compatible con:



# MANGOS PERIOFLOW®

## APLICACIÓN PERIOFLOW®

REF FS-466 399,90 €

- ▶ Mango PERIOFLOW®
- ▶ 20 nuevas toberas PERIOFLOW®
- ▶ Útil para retirar la tobera

135°C  
SSS > 1000 ciclos

DAC



- ▶ Mangos específicos para ergonomía óptima.



REF EL-542# 359,90 €

135°C  
SSS > 1000 ciclos

DAC



Adaptador, vea página 22

Compatible con:



► EMS es pionera en terapia de eliminación de biofilm de bolsas profundas con su tecnología PERIOFLOW<sup>®</sup>. Con sucesivas mejoras realizadas por EMS en la tobera, la segunda generación es más fina; recientemente se han introducido marcas de profundidad logrando que la terapia de bolsa profunda sea más segura y eficiente.



► EMS es la única empresa con evidencia clínica publicada sobre la seguridad, eficiencia y comodidad de PERIOFLOW<sup>®</sup>.

#### 40 NUEVAS TOBERAS PERIOFLOW<sup>®</sup>

Con marcas de profundidad



REF DT-476

89,90 €

#### 160 NUEVAS TOBERAS PERIOFLOW<sup>®</sup>

Con marcas de profundidad



REF DT-476A

299,90 €

Compatible con:



# MANGOS PIEZON®

## APLICACIÓN **PIEZON®**

REF FS-455 790,00 €

- ▶ Mango PIEZON® LED
- ▶ Instrumento PIEZON® PS
- ▶ 4 guías de luz de repuesto

135°C  
SSS > 1000 ciclos

DAC



Para compatibilidad con DAC, se debe quitar la guía de luz.  
La guía de luz no resiste la lubricación y los residuos de aceite DAC.

## MANGO SIN LED

Mango universal original PIEZON®

REF EN-061 490,00 €

135°C  
SSS > 1000 ciclos

DAC



Compatible con:



- Los mangos PIEZON® de la anterior generación no eran compatibles con LED.

## MANGO SIN LED

Mango universal original PIEZON®

REF EN-041 490,00 €



## MANGO SIN LED

Mango universal original PIEZON®

REF EN-046 490,00 €



- Para más información sobre los antiguos equipos y mangos, póngase en contacto con nuestro servicio posventa: [ems-dental.com/contact](http://ems-dental.com/contact)

135°C  
SSS > 1000 ciclos



Compatible con:



## COMBITORQUE

Combinación única de llave dinamométrica y soporte para instrumentos

REF FV-097 29,90 €

135°C  
SSS > 1000 ciclos



# ACCESORIOS



## PEDAL

Pedal inalámbrico, con modo boost

EK-404B

499,90 €

Pedal inalámbrico, sin modo boost

EK-410A

129,90 €



## MANGUERA

Manguera AIRFLOW®

EM-145A

399,90 €

Manguera PIEZON® (AFPM)

EM-146A

399,90 €



## CÁMARA DE POLVO

Cámara de polvo PLUS - rojo

EL-607

199,90 €

Cámara de polvo CLASSIC - blanco

EL-606

199,90 €



## BOTELLAS

Botella PIEZON® - graduación en ml

EG-111A

99,90 €

Botella NIGHT CLEANER - azul

EG-120A

99,90 €

## HIGIENE

3 filtros de agua - azul

FV-094

69,90 €

Filtro de aire - blanco

EL-599

24,90 €

Easy Clean

FV-083

29,90 €

Clip+Clean

EL-655

19,90 €



# AIRFLOW® MASTER Y AIRFLOW® MASTER PIEZON®



## PEDAL

Pedal multifunción

EK-169#

289,90 €



## MANGUERA

Manguera AIRFLOW®

Manguera PIEZON®

Soporte magnético para mango derecho

Soporte magnético para mango izquierdo

Cable de conexión

EM-105A

259,90 €

EM-111A

339,90 €

FV-077

59,90 €

FV-078

59,90 €

EK-186#

29,90 €



## CÁMARA DE POLVO

Cámara de polvo AIRFLOW®

Cámara de polvo AIRFLOW® PERIO y PLUS

EL-368#

319,90 €

EL-474#

319,90 €



## BOTELLAS (AFMP)

Botella 350 ml

Botella 500 ml

EG-064

29,90 €

EG-082

39,90 €



## HIGIENE

Set de filtro de agua

Set de bomba peristáltica (AFMP)

Easy Clean

Easy Fill

EQ-125

3,90 €

BA-035C

43,00 €

FV-083

29,90 €

FV-082

29,90 €

# AIRFLOW® S1 Y AIRFLOW® S2



## PEDAL

Pedal

EH-004

129,90 €



## MANGUERA

Manguera AIRFLOW® (S1 y S2)

EM-094

229,90 €

Manguera PIEZON® (S2)

EM-060

159,90 €

## HIGIENE

Filtro de agua

EQ-029

19,90 €

Llave de filtro de agua

DT-015

9,90 €



Easy Clean

FV-083

29,90 €

# PIEZON® MASTER 700



## PEDAL

Pedal multifunción

EK-169#

289,90 €



## MANGUERA

Manguera PIEZON®

Soporte magnético para mango derecho

Soporte magnético para mango izquierdo

Cable de conexión

EM-110A

339,90 €

FV-077

59,90 €

FV-078

59,90 €

EK-186#

29,90 €



## BOTELLAS

Botella 350 ml

Botella 500 ml

EG-064

29,90 €

EG-082

39,90 €



## HIGIENE

Set de bomba peristáltica

BA-035C

43,00 €

# PIEZON® 150 Y PIEZON® 250



## PEDAL

Pedal 2 funciones

EK-128

129,90 €



## MANGUERA

Manguera PIEZON®

EM-140/A

159,90 €



## HIGIENE

Set de bomba peristáltica

Set de filtro de agua

BA-035B

43,00 €

FV-084

29,90 €



## BOTELLAS

Botella 350 ml

Botella 500 ml

EG-064

29,90 €

EG-082

39,90 €

# HANDY 3.0 Y HANDY 2+



## TAPA

Tapa  
Junta O-ring para tapa

EL-529

39,90 €

FV-087

29,90 €



## HIGIENE

Easy Clean

FV-083

29,90 €

Easy Fill

FV-074

29,90 €



Adaptador para termodesinfección

FV-088

49,90 €



## TAPA

Tapa transparente  
Anillo de tapa  
Junta O-ring para tapa

AB-171A/A

19,90 €

AB-172#COLOR

29,90 €

EQ-157

5,50 €



## HIGIENE

Easy Fill

FV-075

29,90 €

# FROM THE VALLEY TO

► Durante más de 35 años, EMS ha desarrollado junto con los clínicos más importantes de todo el mundo tecnologías y protocolos de primer nivel que permiten a los pacientes disfrutar de dientes naturales e implantes durante mucho más tiempo.

“Primum non nocere”\* e invasividad mínima no es sólo una obligación, es nuestra forma de vida.



CENTRO DE INVESTIGACIÓN  
Y PLANTA DE FABRICACIÓN DE EMS  
NYON, **SUIZA**

# THE TOP



MONT BLANC, 4.807M



CONTACTE CON NOSOTROS  
[ems-dental.com/contact](https://ems-dental.com/contact)  
+34 91 528 99 89  
[info@ems-espana.com](mailto:info@ems-espana.com)

# GLOSARIO

|                                | PÁGINIA |                        | PÁGINA |
|--------------------------------|---------|------------------------|--------|
| Adaptador (Handy)              | 22      | Glycina                | 15     |
| Polvo AIRFLOW® CLASSIC Comfort | 14      | Mango, AIRFLOW®        | 36     |
| AIRFLOW® Handy 3.0             | 20      | Mango, PERIOFLOW®      | 38     |
| AIRFLOW® Handy 3.0 PERIO       | 21      | Mango, PIEZON®         | 40     |
| AIRFLOW® Handy 3.0 SUPRA       | 21      | NIGHT CLEANER          | 30     |
| AIRFLOW® Handy 3.0 PLUS        | 21      | Tobera PERIOFLOW®      | 39     |
| AIRFLOW® Handy 3.0 PREMIUM     | 21      | Polvo PERIO            | 15     |
| Adaptadores AIRFLOW® Handy     | 22      | PIEZON® 150            | 25     |
| AIRFLOW® One                   | 10      | PIEZON® 250            | 24     |
| Polvo AIRFLOW® PERIO           | 15      | Instrumentos PIEZON®   | 26     |
| Polvo AIRFLOW® PLUS            | 12      | PIEZON® Master 700     | 23     |
| AIRFLOW® Prophylaxis Master    | 06      | Instrumento PIEZON® PS | 28     |
| BacterX® Pro                   | 32      | Polvo PLUS             | 12     |
| CombiTorque®                   | 41      | Station                | 08     |
| Clip+Clean                     | 34      | Ultra Clean            | 31     |
| Easy Clean                     | 34      |                        |        |
| GBT, Guided Biofilm Therapy    | 4       |                        |        |

# EMS EN EL MUNDO



## OFICINA CENTRAL

CH

**NYON, SWITZERLAND**  
**ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA**  
Chemin de la Vuarpillière 31  
CH - 1260 Nyon  
[www.ems-dental.com/en/contact](http://www.ems-dental.com/en/contact)  
[www.ems-dental.com](http://www.ems-dental.com)  
T. +41 22 994 47 00  
F. +41 22 994 47 01



## FILIALES DE EMS EN EL MUNDO

DE

**MUNICH, GERMANY**  
**EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GMBH**  
Schatzbogen 86  
DE - 81829 München  
T. +49 89 42 71 61 0  
F. +49 89 42 71 61 60  
E-mail: [info@ems-ch.de](mailto:info@ems-ch.de)

PL

**KATOWICE, POLAND**  
**EMS POLAND SP. Z O.O.**  
Al. Roździeńskiego 188H  
PL - 40-203 Katowice  
T. +48 32 4937060  
E-mail: [info@ems-poland.com](mailto:info@ems-poland.com)

FR

**FONCINE, FRANCE**  
**EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS FRANCE SARL**  
32, route de Pontarlier  
FR - 39460 Foncine-le-Haut  
T. +33 84 51 90 01  
F. +33 3 84 51 94 00  
E-mail: [info@ems-france.fr](mailto:info@ems-france.fr)

US

**DALLAS, USA**  
**EMS CORPORATION**  
11886 Greenville Avenue, Ste 120  
US - Dallas, Texas 75243  
T. +001 972 690 8382  
F. +001 972 690 8981  
E-mail: [info@ems-na.com](mailto:info@ems-na.com)

ES

**MADRID, SPAIN**  
**EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA SLU**  
C/ Tomás Bretón, 50-52 2ª planta  
ES - 28045 Madrid  
T. +34 91 528 99 89  
E-mail: [info@ems-espana.com](mailto:info@ems-espana.com)

AU

**SYDNEY, AUSTRALIA**  
**E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS OCEANIA**  
Unit 1, Building 4 – Sydney Corporate Park  
160 Bourke Road  
AU - Alexandria, NSW 2015  
T. +61 405 095 867  
E-mail: [info@ems-oceania.com](mailto:info@ems-oceania.com)

IT

**MILANO, ITALY**  
**EMS ITALIA S.R.L**  
Via Faravelli 5  
IT - 20149 Milano  
T. +39 02 3453 8111  
E-mail: [dental@ems-italia.it](mailto:dental@ems-italia.it)

JP

**TOKYO, JAPAN**  
**E.M.S. JAPAN BRANCH OFFICE**  
5F, 4-6-5 Nihombashi-Muromachi, Chuo-ku  
JP - Tokyo 101-0022  
T. +81(0) 3 3278 0375  
F. +81 (0) 3 3278 0376  
E-mail: [emsjapan@ems-ch.com](mailto:emsjapan@ems-ch.com)

UK

**CAMBRIDGESHIRE, ENGLAND**  
**EMS UK LTD SUITE 2**  
Xenus House  
Sandpiper Court  
Phoenix Park - Eaton Socon  
UK - St Neots, Cambridgeshire  
PE19 8EP  
T. +44 01480 587260  
Email: [info@ems-unitedkingdom.com](mailto:info@ems-unitedkingdom.com)

CN

**SHANGHAI, CHINA**  
**医迈斯电子医疗系统贸易(上海)有限公司**  
**E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.**  
24A, Jin Sui Mansion,  
Nº379 Pudong Nan Rd.  
CN - Shanghai 200120  
Tel. +86 21 3363 2323  
E-mail: [emschina@ems-ch.com](mailto:emschina@ems-ch.com)

JO

**AMMAN, JORDAN**  
**EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS JORDAN**  
No.2 - second floor, 195 Arar (Wadi Saqra) str.  
JO - Amman  
T. +962790228060



Copyright: 2020 EMS.  
E.M.S. Electro Medical Systems S.A.  
Ch. de la Vuarpillière 31  
1260 Nyon - Switzerland  
+41229944700 - [ems-dental.com](http://ems-dental.com)

**EMS**   
MAKE ME SMILE.